


セツプ

電気泳動とウェスタンブロッティングを 画面の指示で簡単操作

電気泳動とウェスタンブロッティングを自動化しました
再現性の良い泳動像が得られます
支持体の選択により可能性が広がります




動作ブロック図

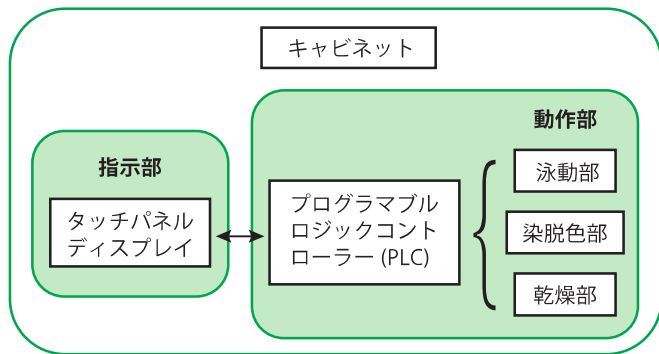

セツブ本体は指示部と動作部から構成される。タッチパネルディスプレイからの指示信号により PLC が動作部の制御を行う。動作部の電気泳動部（泳動部）で電気泳動した支持体は、手で転写を行う。転写した膜は染脱色部でブロッキング・抗原抗体反応・染色・脱色を行う。洗浄後の転写膜は乾燥部で乾かす。

検査の流れ

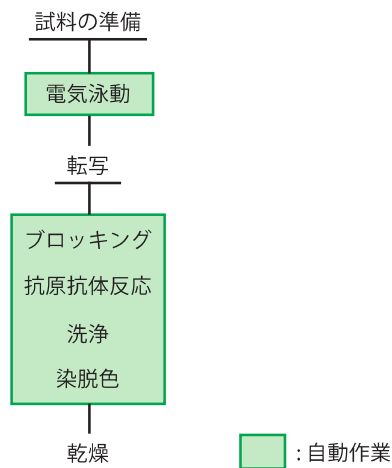

構成

本体
ディスプレイ: 7インチ

電氣的定格

定格電圧: AC100V
周波数: 50 又は 60Hz
消費電力: 300VA
保護の形式: クラス1 機器（要接地）
保護の程度: B 型機器

寸法・重量

外形寸法: 58(W)×48(D)×50(H) cm（突起物を除く）
重量: 26kg

仕様

測定項目: オリゴクローナルバンド
処理能力: 1 枚目 180 分 2 枚目以降 90 分
処理数: 1 枚当たり 8 検体（血清、髄液のペア）
支持体: アガロース膜
転写膜: ニトロセルロース膜 (81×134mm)
泳動部: 冷却のみ（15～20℃）
乾燥部: 送風のみ

別売品

Cat.No.	品目名
J515	8 連マルチピペット
J516	8 連マルチピペット用チップ
J518	マルチピペット台（セツブ）

設置場所

機器の重量に耐えられる水平な台に設置する
機器の左右、背面に 10 cm 以上のスペースを確保する
別途、側面に脱色液などのタンクを設置するスペースが必要

