


クイックジェル
QuickGel

- クイックジェル専用の泳動槽です。
- 泳動槽蓋に炭素棒が装備されており、泳動用バッファー不要で蓋を閉めればセット完了です。
- 電子冷却機能付きで、2段階の温度設定が可能です。
- 蓋を開けると自動的に電気が切れる安全設計です。


【関連商品】 泳動用電源



1504 タイタンプラス パワーサプライ

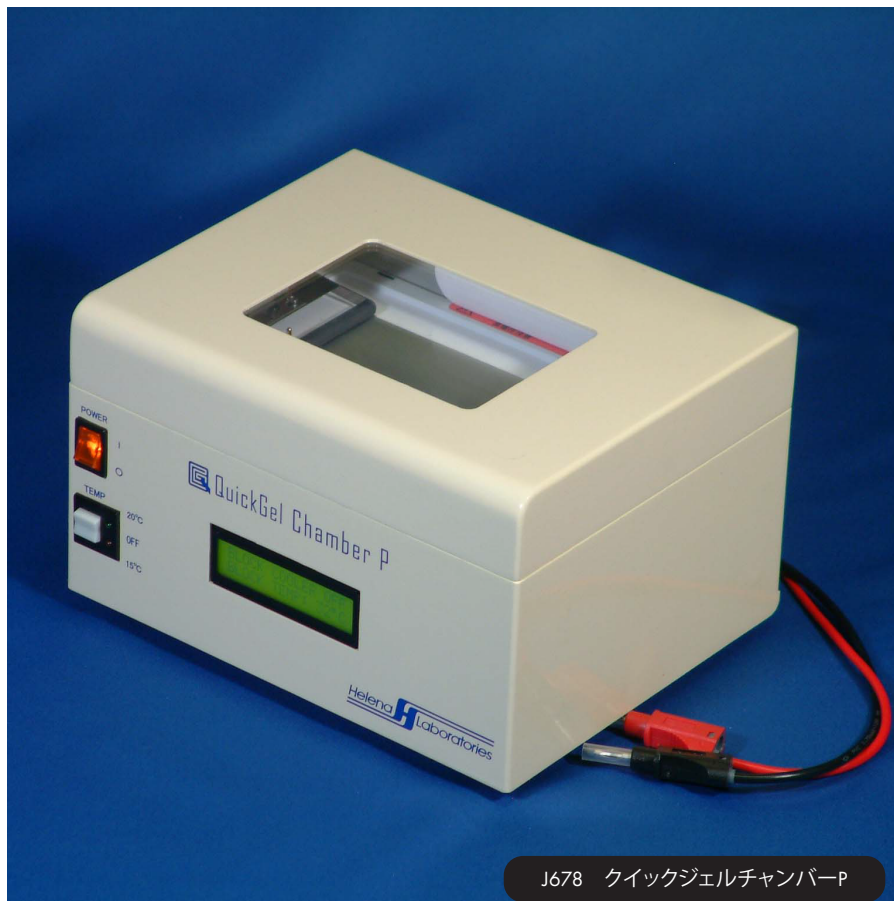

J678 クイックジェルチャンバーP

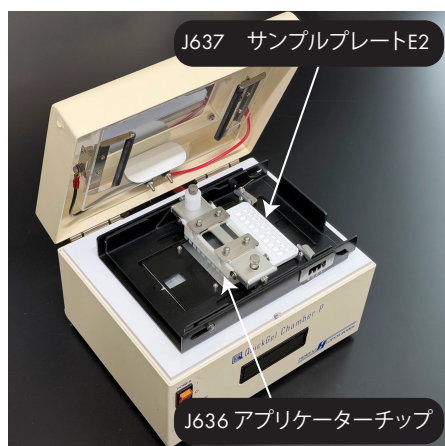

J637 サンプルプレートE2

J636 アプリケーターチップ

【関連商品】 塗布器具



J653 クイックジェル アプリケーター

【関連商品】 インキュベーター・乾燥器



J160 I.O.D.

【関連商品一覧】

Cat.No. 品名

- 1504 タイタンプラス パワーサプライ
- J160 I.O.D.
- J636 アプリケーターチップ
- サンプルプレート E2
- J653 クイックジェル アプリケーター
- J654 クイックジェル 抗血清アプリケーターセット
- J662 クイックジェル アライニングベース
- J668 クイックジェル 抗血清アプリケーター
- J678 クイックジェルチャンバー P
- J513 ウェイトプラス
- J656 クイックジェル 染脱色容器
- J657 クイックジェル 試薬展開ローラー
- J4062 クイックジェル 湿潤箱
- J670 展開板
- J641 電極棒 E2

【クイックジェルチャンバー P 規格】

■本体

寸 法：213(W)×173.5(D)×133(H)mm
重 量：約 2.5kg
耐 圧：600V
素 材：アルミニウム、ABS 樹脂
アクリル、アルミニウム等
電極素材：ステンレス、炭素
冷却方法：電子冷却式 (ペルチェ素子使用)
電 源：AC100V
消費電力：50W

製品の詳細につきましては、弊社営業部までお問い合わせください。
製品改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社ヘレナ研究所

本社 〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤9-21-19
☎ 048-833-3208 FAX 048-833-3273